


The logo features a large, bold, white letter 'G' enclosed within a white square. To the right of this square, the word 'Godah' is written in a clean, white, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the word 'Godah'.

Godah®

Uma marca Habba Med

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

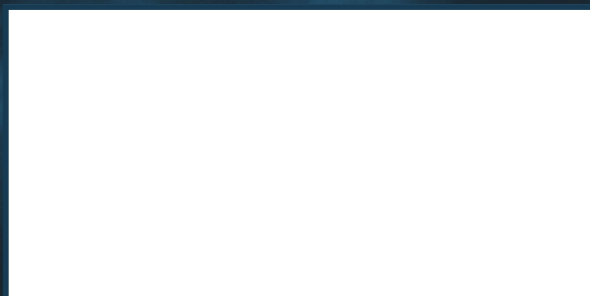

BOWIE & DICK

7KG E 4KG

O teste Bowie & Dick Godah possui a finalidade de avaliar o correto funcionamento das autoclaves a vapor que possuem bomba de vácuo e identifica com precisão falhas, como remoção de ar inadequada, fugas de ar, má penetração de vapor, presença de gases não condensáveis, vapor de baixa qualidade, temperatura e/ou tempo de exposição incorreto.

G Classificação:

Tipo 2 pela Norma AAMI/ISO 11140-1: Indicadores Químicos para Uso em Testes Específicos De uso diário

G Indicação:

Indicado para realizar leitura dos três parâmetros críticos do processo de esterilização – qualidade de vapor, temperatura e tempo de exposição – em ciclos específicos a 121oC por 15 minutos ou 134oC por 3,5 minutos.

De acordo com o Art. 93 da RDC 15/2012 ANVISA, “é obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave que contenha bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia.”.



G Conformidade:

O Teste Bowie & Dick GODAH 4KG e 7KG estão em conformidade com a Norma AAMI/ISO 11140-1 e AAMI/ISO 11140-5, sendo ele também isento de metais pesados, 100% reciclável e possui sua embalagem impermeável